

MYO SIMPLE

**Das Hilfsmittel zur Wachstumslenkung,
funktionellen Neuschulung im Mund- und
Gesichtsbereich und zur Unterstützung
kieferorthopädischer Behandlungen**



Malokklusionen auf natürliche
**Weise vorbeugen und
behandeln**

FÜR WEN IST ES GEDACHT?

**Ab 3 Jahren bei Kindern
und Jugendlichen mit:**

Mundatmung
atypischem Schluckmuster
Zahnfehlstellungen

WARUM MYOSIMPLE

Im Kindes- und Jugendalter können bestimmte orofaziale Funktionen – wie Atmung, Schlucken oder Zungenruhelage – gestört werden. Diese Störungen können zu Zahnfehlstellungen führen.

MyoSimple ist ein myofunktionelles Hilfsmittel das entwickelt wurde, um das orofaziale Gleichgewicht wiederherzustellen – insbesondere Atmung, Schlucken und Zungenruhelage.

Bei frühzeitigem Einsatz unterstützt MyoSimple dabei, die Okklusion zu entlasten und Malokklusionen vorzubeugen. Dadurch wird eine spätere kieferorthopädische Behandlung erleichtert.

MyoSimple ist außerdem sehr hilfreich, um den Übergang zwischen zwei kieferorthopädischen Phasen zu erleichtern.

WIE MYOSIMPLE FUNKTIONIERT

MyoSimple ist ein Hilfsmittel zur myofunktionellen Rehabilitation. Sobald es im Mund eingesetzt ist, fördert es:

- Nasenatmung statt Mundatmung,
- Zungenruhelage am Gaumen,
- korrektes Schlucken,
- eine harmonische Zahnstellung.

Es wird hauptsächlich nachts getragen, je nach Empfehlung der behandelnden Fachperson aber auch für einige Stunden tagsüber – bei ruhigen Aktivitäten wie Lesen, Hausaufgaben, Reisen oder Bildschirmzeit.



Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt 6 bis 12 Monate, kann jedoch je nach individuellen Bedürfnissen variieren. Ihre behandelnde Fachperson berät Sie zur passenden Anwendungsdauer.



PFLEGE


Reinigen Sie die Apparatur vor und nach jeder Anwendung mit einer Zahnbürste und Zahnpasta.

Tipp: Falls die Apparatur in der Nacht herausfällt – was besonders zu Beginn normal ist –, ist das kein Grund zur Sorge. Bleiben Sie konsequent: Regelmäßiges Tragen unterstützt die Gewöhnung.

Falls erforderlich, kann ein weicher Klebestreifen (z. B. ein Leukopor®) auf die Lippen geklebt werden, um den Mundschluss während der Nacht zu unterstützen.

WIE WIRD MYOSIMPLE GETRAGEN?

Die Markierung „A» wird vor den oberen Zähnen positioniert.

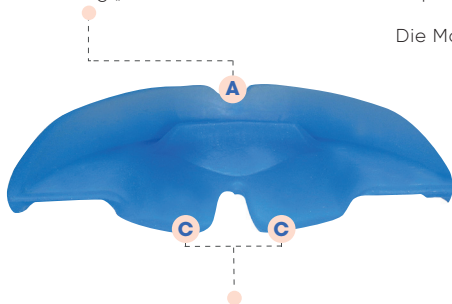

Die Markierung „B» wird vor den unteren Zähnen positioniert.



Durch die linguale Rampe wird die Zunge in die physiologische Ruheposition am Gaumen geführt.

ERGÄNZENDE ÜBUNGEN

Um die Wirksamkeit der Apparatur zu unterstützen, kann Ihre behandelnde Fachperson einfache Übungen empfehlen – mit Fokus auf:

- Nasenatmung,
- Zungenruhelage,
- Schlucken,
- Aussprache.

Diese Übungen sollten täglich durchgeführt werden, durchschnittlich 5–10 Minuten pro Tag, entsprechend den Empfehlungen Ihrer behandelnden Fachperson.

WICHTIGE PUNKTE

Z_{z1}

MyoSimple soll jede Nacht getragen werden



Tagsüber: 1–2 Stunden anwenden
(während einer ruhigen Aktivität)



MyoSimple morgens und abends reinigen



Tägliche Übungen durchführen,
sofern diese verordnet wurden



Bei Verlust, Beschwerden oder Schmerzen
sofort die behandelnde Fachperson kontaktieren



BIOTECH DENTAL
ORTHO

MYOSIMPLE

MYOSIMPLE

ist ein Medizinprodukt, das vollständig in Frankreich hergestellt wird.

Frei von Latex, Phthalaten, endokrinen Disruptoren und Bisphenol.
CE-zertifiziert.

Alle unsere Apparaturen werden in ESAT-Betrieben verpackt – französischen geschützten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.



MEHR ERFAHREN

contact@myosimple.com
www.myosimple.com



Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (S.A.S.) mit einem Stammkapital von 125.000 €
Handels- und Gesellschaftsregister: Aix-en-Provence 801 674 376
Abbildungen unverbindlich. Bitte nicht im öffentlichen Raum entsorgen.
Gedruckt von VALLIERE – 163 Avenue du Luxembourg – ZAC des Molières – Miramas – Frankreich.
Bitte lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanweisung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch.
MYOSIMPLE – Klasse-I-Medizinprodukte – CE
Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craonne – 13300 Salon-de-Provence – Frankreich

MYO-DE-DE_Rev.00_04/2026